

**DONJOY**<sup>®</sup>

Performance & Lifestyle

## Podalux

Trattamento dinamico  
post-operatorio per  
alluce valgo



Testo a cura del Dott. Ottorino Catani  
Chirurgo ortopedico del piede

La scarpa PODALUX è un presidio ortopedico progettato e realizzato da Donjoy che si distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato per l'ottima qualità delle sue caratteristiche di performance, biocompatibilità e compliance biodinamica.

### Indicazioni


- Trattamento post-operatorio dell'alluce valgo (in seguito a bunionectomia)
- Trattamento dei traumi e delle fratture del tarso e dell'avampiede
- Mantenimento della corretta posizione del piede e dell'alluce durante la riabilitazione

### Caratteristiche

- **Suola con avampiede "a dondolo"** che consente il carico e ne favorisce la modulazione con il "beccheggio" solidale di tutto l'avampiede.
- Tenuta efficace delle **chiusure a strappo in velcro** tali da governare anche i minimi movimenti del piede all'interno della calzatura e consentire un ottimo comfort delle medicazioni post-operatorie.
- **Dinamicità** della struttura portante di tomaia e suola garantita da uno scheletro in plastica rimovibile, così da trasformarsi in qualsiasi momento del processo riabilitativo del piede in una calzatura normale e di impedire ulteriori sovraccarichi funzionali a carico della caviglia.
- **Copertura rimovibile "a cappuccio"** dell'avampiede in tessuto biocompatibile e traspirante per proteggere le medicazioni da contatti esterni ed impedire che le chiusure in velcro si fissino alle medicazioni stesse.
- **Pianta ampia antiscivolo** per una maggiore stabilità.




## Analisi comparativa del movimento dell'articolazione metatarso falangea durante la camminata

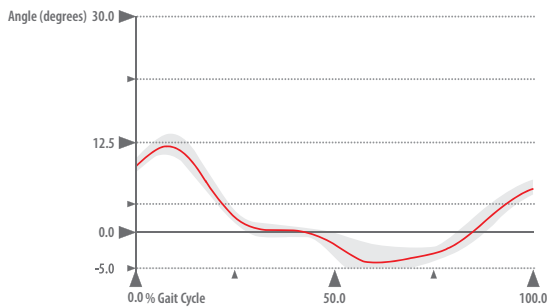


### Altre scarpe post-operatorie

- Parziale limitazione delle articolazioni metatarso falangee
- Aumento della dorsoflessione della caviglia con lieve movimento della flessione plantare
- Influisce negativamente sul movimento del ginocchio
- Interferisce con il movimento del passo

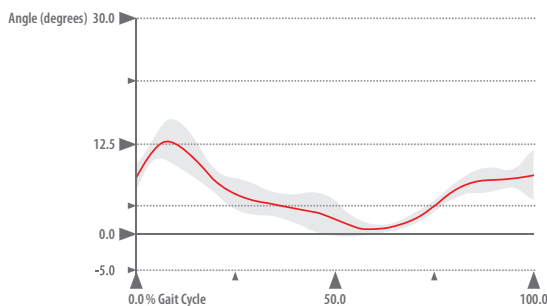

### Scarpa Podalux con soletta

- Parziale limitazione dell'articolazione metatarso falangea (8° di dorsoflessione)
- 40% di scarico del peso sull'avampiede
- Movimento naturale della caviglia e del ginocchio

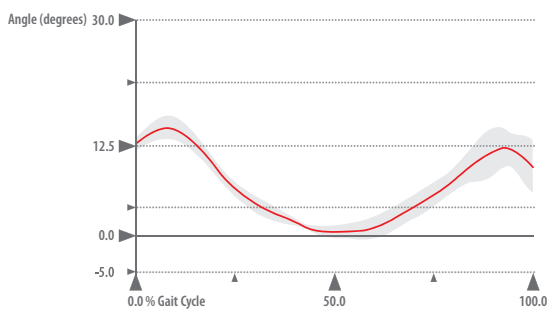

### Scarpa Podalux senza soletta

- Minima limitazione dell'articolazione metatarso falangea (10° - 12° di dorsoflessione)
- 40% di scarico del peso sull'avampiede
- Movimento naturale della caviglia e del ginocchio

#### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE ARTICOLO	MISURA SCARPA UOMO	MISURA SCARPA DONNA	MISURA
CPO-S	35.5 - 37	35 - 36	Small
CPO-M	37.5 - 38.5	37 - 38	Medium
CPO-L	39 - 40	38.5 - 39.5	Large
CPO-XL	41 - 42	40 - 41	XLarge
CPO-XXL	42.5 - 46	42 - 44.5	XXLarge

DJO Italia Srl | Via Leonardo da Vinci 97 | 20090 Trezzano sul Naviglio | Milano | ITALIA  
[www.DJOglobal.it](http://www.DJOglobal.it)



*Together in Motion™*